

# Protège bassin de lit Care bag Classic

Code article ACL : **7711141**



## Présentation


**Sac d'aisance contenant un tampon super-absorbant permettant de gélifier tous les liquides et de bloquer la prolifération des odeurs.**

## Mode d'emploi

1. Ouvrir le pack et en extraire le rouleau de sacs
2. Dérouler le 1<sup>er</sup> sac et le détacher selon la prédécoupe
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Disposer le sac sur le bassin de lit
5. Faire les besoins dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.



## Précautions d'emploi

 Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi.  
Ne pas laisser le sac à la portée des enfants.

## Composition

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

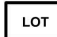

## Efficacité

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

## Bénéfices

- Protection pour tout type de bassins. Particulièrement recommandé dans le cadre des isolements infectieux, de l'oncologie, des urgences, de la maternité, de la radiologie, ...
- Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

## Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot  et une date de péremption  (5 ans).

## Conformité

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.

Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.



## Dangers/sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.



Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.

A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Code douanier

5603149090

## Conditionnement

Unité	Pack avec fermeture à Zip de 20 sacs	Sac : 60x40 cm / Tampon : 13x24 cm
Carton	20 packs de 20 sacs (soit 400 sacs)	60 (L) x 40 (l) x 20 (h) cm / 16 Kg
Palette	32 cartons (8 couches de 4 cartons) - soit 640 packs / 12800 sacs	80 (L) x 120 (l) x 160 (h) cm / 512 Kg (palette non comprise)

## Elimination

Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle. Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).